




Attends tuotteet on testattu ja hyväksytty ihoystävällisiksi proDERM-laatusinetillä, jonka on myöntänyt Institute for Applied Dermatological Research, Hampuri, Saksa



Inkontinenssituotteita tarvitsevat ihmiset käyttävät niitä usein 24 tuntia päivässä. Tämä tarkoittaa sitä, että iho on jatkuvasti kosketuksessa tuotteen kanssa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää valita ihoystävälliset materiaalit. Vielä tärkeämpää on, ettei inkontinenssisuojien pinta jää märäksi. Kosteus voi ärsyttää tai jopa vahingoittaa ihoa aiheuttaen käyttäjälle huomattavaa vaivaa ja mahdollisesti myös korkeita ihonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia.


proDERM-laatusinetin kolmella eri testillä on testattu Attends- inkontinenssituotteiden vaikutus ihon terveyteen:

1. Kuivamateriaalitesti

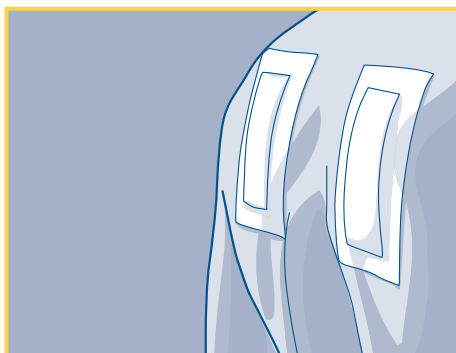

Soveltaan testataan pieninä alueina (kuivaa tuotetta tai ihoa kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja) testihenkilön selkään asetettuna 3 x 24 tunnin jaksona. Päivittäin tehdään visuaalinen dermatologinen luokittelu, jossa huomioidaan kaikki ihoreaktiot ja luokitellaan proDERM asteikolla.

2. Märkämaterialitesti

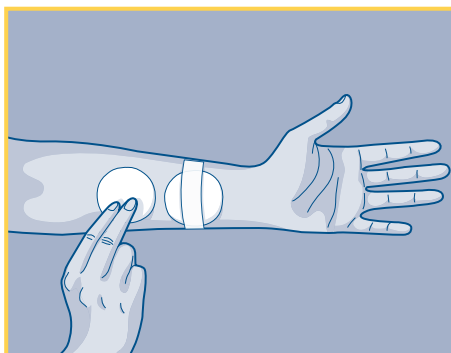

Soveltaan testataan alueita synteettisellä urealla kostutetulla Attends-tuotteella 3 x 24 tuntia. Vaikutukset ihoon arvioidaan visuaalisesti ja luokitellaan proDERM ja TEWL*-mittausten mukaisesti. Tuotteen kosteus kuvaa rewet**-tuloksia, joita käytetään mittaamaan tuotteiden suorituskykyä ja jäljittämään käytännön tilanteita.

3. Arviointi käytössä



Yli 200 laitoksissa asuvaa Attends-tuotteiden käyttäjää osallistui 4 viikon arviointijaksoon. Hoitohenkilökunta valvoi tarkasti tuotteiden käytön vaikutusta ihoon.

Kaikkia tuotteita ei tarvitse yksilöllisesti testata näillä kolmella testillä tuotteiden ollessa materiaaliltaan ja imuytimen teknologialtaan identtiset. Silloin voidaan käyttää samoja testituloksia. Kaikkia yksittäisiä materiaaleja testataan vähintään kuivamateriaalitestillä.

* Kosteuden haihtuminen (Transepidermal Water Loss): menetelmällä mitataan onko iho menettänyt kosteuttaan, mikä on merkki heikentyvästä ihon terveydestä.

** Rewet-testit mittaavat tuotteen pinnalle palautuvan kosteuden määrää tuoteeseen kohdistuessa painetta sen jälkeen kun suojaan on imeytynyt nestettä.

Johtopäätös

Attends-tuotteiden imuytimen teknologia antaa käyttäjälle erinomaista suojaa ohivuotoja vastaan ja kuivuutta iholle. proDERM-testien tulokset (kuiva- ja märkämateriaalitestit sekä arviointi käytössä) osoittavat Attends-tuotteiden suoriutuvan erittäin hyvin ihon kanssa kosketuksissa ollessaan.

Tämän vuoksi proDERM on myöntänyt Attendsille oikeuden käyttää laatusinettiä tuotteissaan*



* Testatut/hyväksytyt tuotteet: Slip Regular, Slip Active, Flex, Pull-Ons, Contours, Soft, Cover-Dri ja Adjustable.

Meidän tulee ansaita laatusinetti päivittäin ...

Päivittäin 25 täysperäkkäistä tuotetta lähtee Attendsin tehtaalta Anebystä, Ruotsista, toimitettaviksi asiakkaille eri puolille Eurooppaa. Säilyttääksemme korkeat laatustandardimme, arvostamme kaikkea saamaamme palautetta ja käsittelemme ne huolellisesti. Kaiken ihon hyvinvointiin liittyvän palautteen olemme velvoitettuja jakamaan proDERM-instituutin kanssa. Tämä luo avoimen toimintamallin Attendsin ja proDERM-instituutin välille. Jos ihon terveyteen liittyvien reklamaatioiden määrä lisääntyisi tietyssä tuoteryhmässä, proDERM edellyttäisi tarkkaa selvitystä ja asian korjaamista.

Voimme ylpeänä ilmoittaa, että Attendsilla ei ole ollut tarvetta tehdä korjaavia toimenpiteitä kesäkuussa 2010 alkaneen proDERM-sopimuskauden aikana.

Viitteet:

- proDERM, Institute for Applied Dermatological Research
Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hamburg, Germany.
www.proderm.de
- proDERM Study numbers 09.0363-99, 10.0240-99, 10.0239-06, 11.0427-02, 11-0489-11, 14.0062.02, 15.0022-02,
October 2009 - January 2016.
- In-use Evaluation reports Attends Healthcare, August 2010, February 2012 and June 2014.

Kaikki asiakirjat (raportit, sertifikaatit, pöytäkirjat, testitulokset jne.) ovat pyynnöstä saatavissa.
Viimeisimmän tarkistuksen päiväys: **toukokuu 2016**